

medi-inn[®]
PRO

medi-inn[®] PRO Urin-Mess-System


Geschlossenes Einkammer-Urin-Mess-System



Produktvorteile

- ✓ **Geschlossenes Einkammer-Urin-Mess-System mit Feingraduierung am Urimeter zur exakten Überwachung und Messung der Urinmenge**
 - Messgenauigkeit Urimeter: ± 1 ml
 - Zusätzlicher Urin-Ablass am Urimeter ist möglich
- ✓ **Große Mess-Skala und leicht ablesbare Ziffern**
- ✓ **Nadelfreie Urinprobe-Entnahmestelle**
 - Verhindert Stichverletzungen
 - Einfache Reinigung durch plane Konstruktion
- ✓ **Universal-Stufenkonnektor**
 - Sichert perfekten Halt des Katheters
- ✓ **Große Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und stetigem Druckausgleich durch den Belüftungsfilter**
 - Mindert das Risiko von Harnwegsinfektionen
- ✓ **Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Urinbeutel, Tropfkammer und Urimeter**
 - Hygienischer Druckausgleich
 - Dicht gegen Flüssigkeiten und Bakterien
- ✓ **Festes Doghouse**
 - Gewährleistet nach dem Ablassen des Urins den sicheren Halt des Urin-Ablassventils
- ✓ **Hygienische, komfortable Einhandbedienung durch Urinablass mit Kreuzventil**
- ✓ **Sichere Befestigung durch**
 - Flexible, stabile Universal-Doppelhalterung
 - Zusätzliches Band mit Einhängeöse
- ✓ **Knickstabiler, flexibler Schlauch mit Verschlussklemme und Bettuchklammer**
 - Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknick-Risiko


Produktdetails

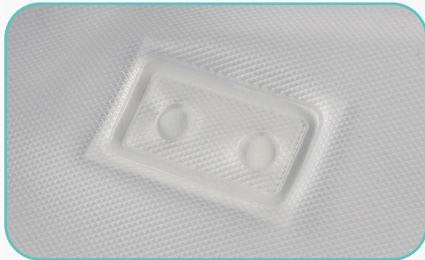

Flüssigkeitsdichter, hydrophob beschichteter Mikrofilter



Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und hydrophob beschichtetem Mikrofilter

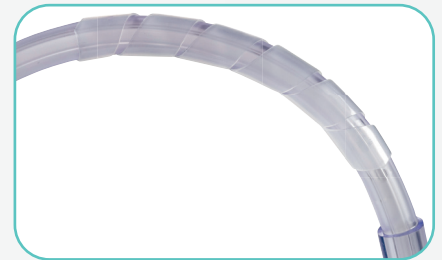

Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende minimiert das Abknick-Risiko



Konnektor mit nadelfreier Urinprobe-Entnahmestelle verhindert Stichverletzungen



Urin-Ablass mit Kreuzventil für eine hygienische, komfortable Einhandbedienung

Bestellinformation

Artikelnummer	Produkt	Beutelvolumen	Urimetervolumen	Schlauchlänge	Typ	Ablassventil	PZN	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N18984	medi-inn [®] PRO Urin-Mess-System	2.600 ml	500 ml	150 cm	Nadelfrei	Kreuzventil, senkrecht	18848222	10 Stück

✓ Medizinprodukt der Klasse I, steril, mit Messfunktion, gemäß Richtlinie 93/42/EWG

✓ Latexfrei

✓ Haltbarkeit: 5 Jahre



Bleiben Sie auf dem Laufenden.

1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

www.body-products.de



WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de