



# LOW DERMA™ Technologie

Sanft zur Haut. Stark im Schutz.



# LOW DERMA™ Technologie

Sanft zur Haut. Stark im Schutz.



LOW DERMA™ steht für eine innovative Materialtechnologie, die sehr hohe Hautverträglichkeit mit zuverlässigem Schutz verbindet. Durch ein speziell entwickeltes Herstellungsverfahren wird auf den Einsatz von chemischen Beschleunigern verzichtet und dadurch das Risiko durch hautreizende Stoffe deutlich reduziert. Das Ergebnis: Handschuhe, die das Risiko allergischer Reaktionen minimieren – ohne Kompromisse bei Qualität und Haltbarkeit.



## Hautfreundlichkeit

Die Low Derma™ Technologie bietet eine innovative Lösung zum Schutz sensibler oder empfindlicher Haut beim Tragen von Untersuchungshandschuhen. Sie ist besonders geeignet für Anwender mit Typ-IV-Sensibilisierung gegenüber chemischen Vulkanisationsbeschleunigern und reduziert die Risiken von Typ-I- und Typ-IV-Kontaktallergien. Die Handschuhe sind frei von Schwefel sowie von chemischen Akzeleratoren wie Thiuramen, Thiazolen und Carbamaten. Sie sind dermatologisch erprobt, reduzieren das Risiko allergiebedingter Hautreaktionen und sind eine bewährte Alternative für Anwender mit Naturlatex-Unverträglichkeit.

## Geprüfter Schutz

Low Derma™ Handschuhe bieten zuverlässigen Schutz für Ihre Hände – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die hochwertige Zusammensetzung ist besonders widerstandsfähig, reißfest und bildet eine zuverlässige Barriere gegen Viren und Bakterien sowie einer Vielzahl an getesteten Chemikalien und Zytostatika. Sie entsprechen der Virendurchlässigkeitsprüfung (ASTM F1671), der Magensäure-Beständigkeit (ASTM D6978) gegen 15 Chemotherapeutika sowie 9 gängigen Chemikalien der EPA N-Liste (ASTM F739) und übertreffen die Anforderungen der ASTM D6319. Das flexible Material ermöglicht präzises Arbeiten und langanhaltenden Tragekomfort – für zuverlässigen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken.

## medi-inn<sup>®</sup> PRO Nitril CLINIC PERFECT WHITE / BLUE

Unsere Nitril Untersuchungshandschuhe haben sich im klinischen Arbeitsalltag vielfach bewährt. Trotz ihrer geringen Wandstärke bieten medi-inn PRO CLINIC PERFECT WHITE / BLUE dank ihrer speziellen Materialzusammensetzung wirksamen Schutz gegenüber Viren und Bakterien sowie ausgewählten Chemikalien und Zytostatika.



Schutz gegenüber Chemikalien, Zytostatika sowie einem Opioid\*



18 Prüfchemikalien




15 Zytostatika / 1 Opioid

### Produkteigenschaften

- Beidhändig tragbar
- Puderfrei (chloriert)
- Fingertexturiert
- Nicht steril
- Länge: 240 mm
- Wandstärken: Finger: 0,07 mm / Handfläche: 0,06 mm
- AQL 1,0
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemikalienschutzklasse Typ B
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 1935/2004

CE2797

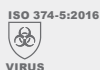

Artikelnummer	Verfügbare Größen	Farbe	Stück je Box	Boxen pro Karton
N12791-w	XS - XL	Weiß	200 Stück	10
N12791-b	XS - XL	Kobaltblau	200 Stück	10

\* Detaillierte Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern

WHITE\*



BLUE\*





Ihr Kontakt:

**BODY PRODUCTS**  
**Relax Pharma und Kosmetik GmbH**

Alfred-Nobel-Straße 1-3  
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0  
Telefax: +49 2234 91165-23  
E-Mail: [info@body-products.de](mailto:info@body-products.de)

[WWW.BODY-PRODUCTS.DE](http://WWW.BODY-PRODUCTS.DE)