



Laparoskopie

Gewebe-Bergebeutel mit und ohne Griff

WWW.BODY-PRODUCTS.DE

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel mit Griff



Stufenlose intraoperative Steuerung mit integriertem Griff




MEDI-BAG GRIP unterstützt das stufenlose intraoperative Öffnen und Schließen des Gewebe-Bergebeutels im Abdomen. Die Steuerung erfolgt über den Pusher-Griff, der den selbstöffnenden Gewebe-Bergebeutel durch die Öffnung der Einführhülse schiebt. Der Gewebe-Bergebeutel wird durch Ziehen des Pusher-Griffs und Fadens sicher verschlossen.

MEDI-BAG GRIP – Mit Griff

- Selbstöffnender und abwerfbarer Gewebe-Bergebeutel mit integriertem Griff
- Transparenter und besonders reißfester sowie flüssigkeitsdichter Bergebeutel aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum geschützten Sammeln kleiner und großer Resektate
- Knickstabiler Nitinoldraht mit Memory-Effekt zum sicheren intraabdominellen Verschluss durch Ziehen des integrierten Fadens
- Farblich gekennzeichnete Medi-Bag-Griffe zur schnellen Orientierung bei der Wahl des passenden Beutel-Volumens von 200 bis 1500 ml
- Hoher Bedienungskomfort durch stufenloses, intraoperatives Öffnen und Schließen
- 10-mm-Trokare zum einfachen Einführen des Bergebeutels
- Latexfrei
- Einmalgebrauch
- Doppel, steril verpackt

Anwendungsgebiete

- Adrenalektomie
- Appendektomie
- Cholezystektomie
- Zystektomie
- Eileiterschwangerschaft
- Laparoskopische Colonchirurgie (Darm-, Sigma-, Colonresektion)
- Lymphknotenentfernung
- Nephrektomie
- Prostataktomie
- Thorakoskopie (Extraktion von Lungensegmenten)

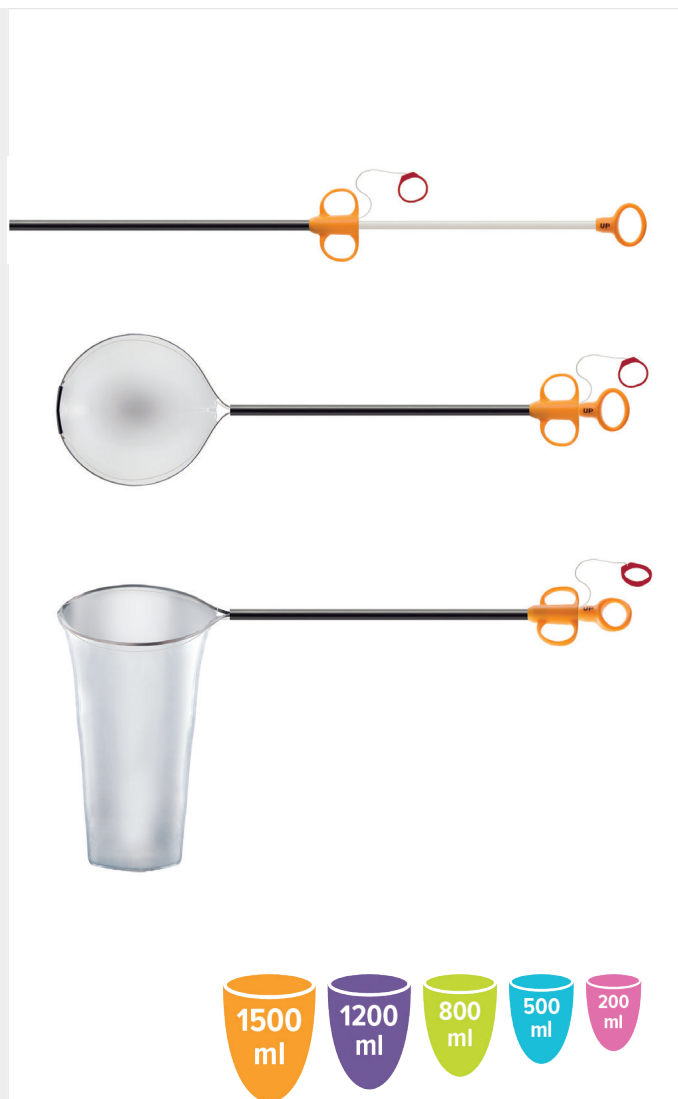

Volumen Bergebeutel	Durchmesser Bergebeutel	Trokar-Durchmesser	Verpackungseinheit	Artikelnummer
200 ml	80 mm	10 mm	5	BP-40350006
500 ml	100 mm	10 mm	5	BP-40350007
800 ml	130 mm	10 mm	5	BP-40350008
1200 ml	130 mm	10 mm	5	BP-40350009
1500 ml	130 mm	10 mm	5	BP-40350010

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel

Einfache Bedienung und schonende Anwendung



MEDI-BAG in der Ausführung ohne Griff ist besonders einfach anzuwenden. Der Gewebe-Bergebeutel des Medi-Bag wird über den integrierten Pusher durch die Einführhülse in das Abdomen geschoben und weitet sich nach dem Abwurf sekundenschnell. Das Schließen des Gewebe-Bergebeutels erfolgt über eine Fasszange.

MEDI-BAG – Ohne Griff

- Selbstöffnender Gewebe-Bergebeutel mit Einführhülse und Pusher
- Transparenter und besonders reißfester sowie flüssigkeitsdichter Bergebeutel aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum geschützten Sammeln kleiner und großer Resektate
- Ummantelter und knickstabiler Nitinoldraht mit Memory-Effekt zum sicheren intraabdominellen Verschluss
- Beutelvolumen von 200 bis 800 ml
- 10- und 12-mm-Trokare zum einfachen Einführen des Bergebeutels
- Latexfrei
- Einmalgebrauch
- Doppel, steril verpackt

Anwendungsgebiete

- Adrenalektomie
- Appendektomie
- Cholezystektomie
- Zystektomie
- Eileiterschwangerschaft
- Laparoskopische Colonchirurgie (Darm-, Sigma-, Colonresection)
- Lymphknotenentfernung
- Nephrektomie
- Prostatektomie
- Thorakoskopie (Extraktion von Lungensegmenten)



Volumen Bergebeutel	Durchmesser Bergebeutel	Trokar-Durchmesser	Verpackungseinheit	Artikelnummer
200 ml	50 mm	10 mm	10	BP-40350011
400 ml	90 mm	10 mm	10	BP-40350012
800 ml	100 mm	10 mm	10	BP-40350013



Bleiben Sie auf dem Laufenden.

1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

www.body-products.de



Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de

WWW.BODY-PRODUCTS.DE